

# ExamVue<sup>DUO</sup>



**Fácil de Aprender**

**Rápido al Usar**

**Sin Características Ocultas**

## Software de Adquisición ExamVue™ Duo

El software de adquisición ExamVue™ Duo es el software avanzado de JPI Healthcare Solutions, diseñado para la adquisición, procesamiento, almacenamiento y visualización de imágenes de rayos X adquiridas digitalmente.

ExamVue™ Duo está indicado para su uso en radiología general, radiología especializada (podología, ortopedia, quiropráctica y otras especialidades) y aplicaciones de rayos X móviles. Ya sea grande o pequeña, ExamVue™ Duo tiene las herramientas y la facilidad de uso para adaptarse a su clínica.

## Nuestras Soluciones - Sus Beneficios

Desarrollado y respaldado internamente por JPI, nuestro software nos permite ofrecer características y soporte de una manera que no está disponible en la mayoría de los competidores.

JPI se dedica a hacer que su experiencia con ExamVue™ Duo sea la mejor posible. Muchas características que son "opciones" costosas en otros software están incluidas en cada instalación de ExamVue™ Duo.

La unión de imágenes, la lista de trabajo de modalidades DICOM, la coincidencia de códigos de procedimiento, la impresión DICOM y la grabación de CD son todas características estándar de ExamVue™ Duo.



*Nuevo software diseñado para el Mercado de Gama Alta y Alto Volumen.*



*Optimizado para un Flujo de Trabajo Simple y Rápido.*



*Incluye Herramientas Valiosas tanto para Grandes Empresas como para Pequeñas Oficinas.*



*Instrucciones y Técnicas Pictóricas para Todas las Exposiciones.*



*Diseñado para Pantallas Táctiles y Computadores de Escritorio.*




*Integración Completa con los Generadores JPI CubeX y Principales Fabricantes, como CPI, Poskom e IMD.*

## ExamVue™ Duo


Con herramientas de imagen intuitivas y de última generación, nuestro software ExamVue™ Duo facilita la adquisición y reduce el tiempo de aprendizaje para obtener imágenes de alta calidad de cualquier paciente en su entorno de trabajo.

ExamVue™ Duo se puede utilizar en tabletas, PCs y laptops con Windows, e integra múltiples detectores, generadores de rayos X líderes en la industria, PACS y sistemas EMR. Confiable y flexible, ExamVue™ Duo se integra perfectamente en cualquier práctica profesional.

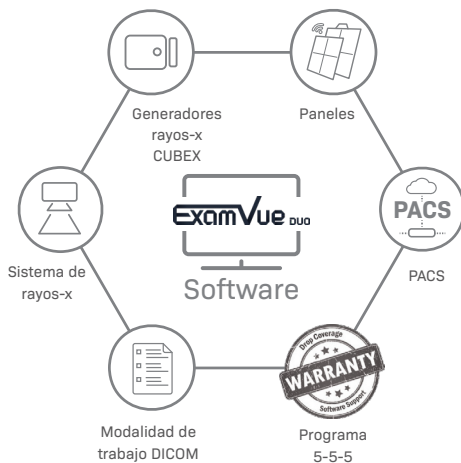

**ExamVue™ Duo** se puede expandir con el ExamVue™ PACS y el JPI Cloud PACS para visualizar en otras computadoras y agregar herramientas adicionales para especialidades médicas como ortopedia, podología y quiropráctica. El JPI Cloud PACS amplía su acceso a las imágenes desde cualquier lugar donde pueda conectarse a Internet y permite compartir fácilmente con médicos y pacientes en su práctica o en cualquier parte del mundo.

## El Software en Resumen

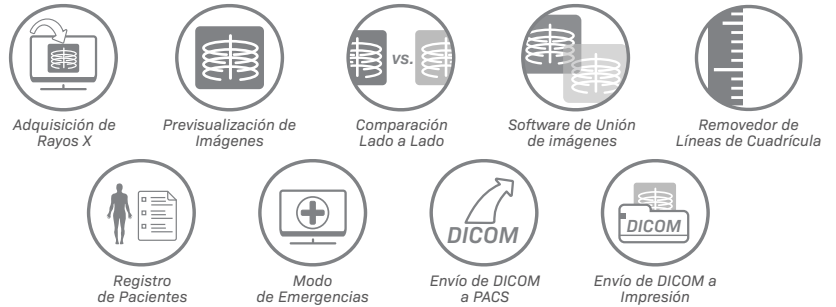

## Herramientas de Manipulación y Anotación de Imágenes

**Manipulación de imágenes:** voltear (vertical/horizontal), rotar (en sentido horario/antihorario), hacer zoom, desplazar, ventana/nivel, lupa, recortar.

**Anotaciones y mediciones de imágenes:** medición de línea, medición de ángulo, texto libre, flecha, marcadores izquierdo y derecho, medición del ángulo de Cobb, medición del ángulo de Norberg.

Y muchas más.

## Características Adicionales:

- ▶ Flujo de trabajo sencillo con la menor interrupción durante la adquisición del examen. Complete todo un examen desde la primera radiografía hasta la última sin necesidad de tocar nunca la computadora.
- ▶ Procesamiento automático de imágenes para todas las vistas, además de control manual para ajustarlas finamente.
- ▶ Actualizaciones continuas del estado de la conexión del panel, PACS, MWL y espacio en el disco duro.
- ▶ Coincidencia de MWL y códigos de procedimiento para la integración con RIS/HIS o nuestro generador de MWL independiente.
- ▶ Exportación e importación de archivos DICOM y JPG.
- ▶ Tablas de técnicas integradas, guías de posicionamiento e índice de exposición para todas las vistas programadas.



**Apariencia** intercambiable

**Monitores** Duales

**Múltiples** Vistas

### Contáctenos:

3555 Veterans Memorial Hwy, Unit D  
Ronkonkoma, NY 11779  
sales@jpihealthcare.com  
(516) 513-1330 Ext. 3



www.jpihealthcare.com